


TECNIS® 1-Piece lente intraocular asférica

Acrílica hidrófoba

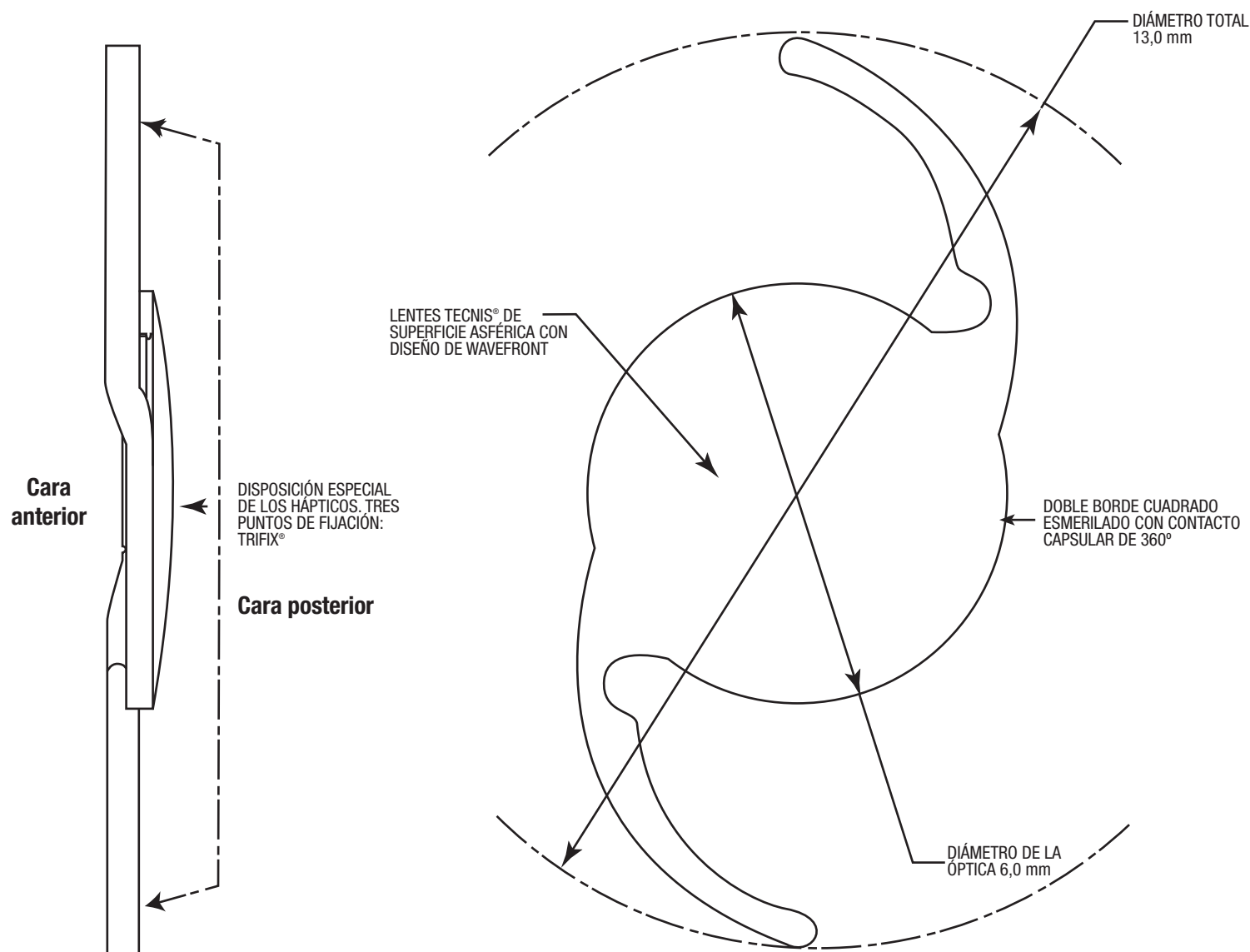

DESCRIPCIÓN	
CARACTERÍSTICAS DE LA ÓPTICA	
Potencias:	+5,0 D a +34,0 D con incrementos de 0,5 dioptrías
Diámetro de la óptica:	6,0 mm
Forma:	Biconvexa, superficie anterior asférica, borde de la óptica cuadrado
Material:	Acrílico hidrófobo, absorbente de UV
Índice de refracción:	1.47
Diseño del borde:	ProTEC™ esmerilado, 360° doble borde cuadrado
BIOMETRÍA ULTRASÓNICA*	
Constante A:	118.8
Profundidad teórica en CA:	5.4 mm
Factor del cirujano: ¹	1.68 mm
CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁPTICOS	
Diámetro total de la lente:	13.0 mm
Configuración:	C
Material:	Acrílico hidrófobo, absorbente de UV
Diseño:	Hápticos en distinto plano respecto a la óptica, Trifix®
INSTRUMENTOS DE PLEGADO RECOMENDADOS	MODELO
Ultra Implantation System (DK7786) Cartucho Ultra One Series™ UNFOLDER® Emerald AR Cartucho UNFOLDER® Emerald AR	DK7786 1VIPR30 EMERALDAR 1CART30

* Valor teórico derivado de una lente típica de 20,0 D. AMO recomienda que los cirujanos personalicen su constante A con base a su equipo y técnicas quirúrgicas, su experiencia con el modelo de lente y los resultados post-operatorios.

www.TECNISIOL.com.
Dr. Zamenhof, 22 - 4º B 28027 Madrid
www.AbbottMedicalOptics.com

1. Calculado en base a la fórmula de Holladay I (Holladay JT, Prager TC, Chandler TY, Musgrove KH, Lewis JW, Ruiz RS. A three-part system for Refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg. 1988;14(1):17-24).

Las lentes TECNIS 1-pieza están indicadas para corregir la afaquia en adultos, cuyo cristalino ha sido extraído mediante extracción extracapsular. Estas lentes se han diseñado para su implantación en saco capsular. Si desea una lista completa de precauciones, advertencias y reacciones adversas, consulte el prospecto. Bajo prescripción.

One Series, ProTEC, TECNIS, and The UNFOLDER, y The UNFOLDER son marcas registradas, propiedad o patente de Abbott Laboratories, sus filiales o empresas afiliadas.