


Modelo	Kestrel 3100m
Modo de adquisición	No midriática
Visión	50°
Distancia de trabajo	13mm
Tamaño mínimo de pupila	≥2.8mm
Modo de enfoque	Automático/Manual
Modo de exposición	Automático/Manual
Operación	Automático/Manual
Fotografía	CCD
Camara	CCD
Resolución	5.6 mega pixels
Compensación de refracción	±25D
Luz de fijación interna	Sí
Luz de fijación externa	No
Luz auxiliar de enfoque automático	Infrarrojo LED
Focos	LED
Rango de movimiento	90 mm a la izquierda y a la derecha, 35 mm antes y después
Dicom 3.0	Sí
LAN	Sí
FTP	Sí
Peso	21kg
Fuente de alimentación	100-240V 50/60HZ

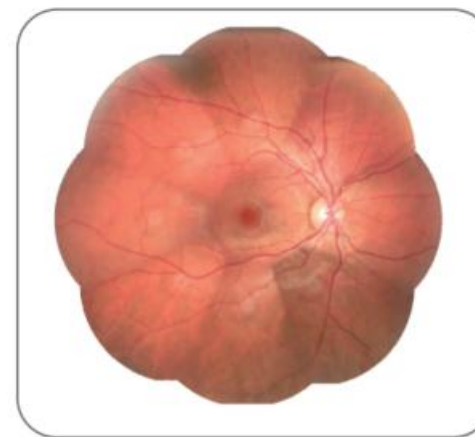

No midriática Cámara retinal automática

No midriática Cámara retinal automática


- La imagen se obtiene automáticamente con un clic
- Ajuste automático para la barbilla, búsqueda y alineación de pupilas
- No midriática, enfoque automático y exposición
- DICOM, LAN y FTP es disponible



Operación inteligente automática, simple y rápida

● Modo automático

Alineación automática y enfoque automático, con un solo clic se puede obtener una imagen de alta definición de ambos ojos

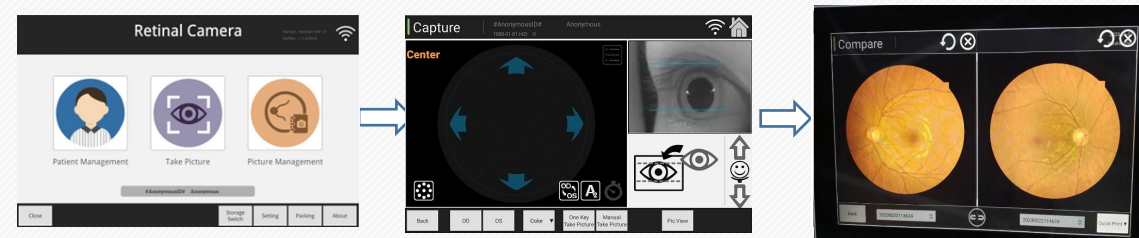

Nuevo paciente

Tomar foto con un clic

Resultado binocular
para 2 ojos con 20
segundos

● Modo manual


Para la fotografía de áreas especiales, la Operación manual puede ayudar a alinear, enfocar, parpadear, compensar la refracción a través de pelucas en la pantalla



Ajuste, alineación, captura manualmente


135° visión- 9 posición Mosaic

La función mosaico permite generar imágenes de fondo de ojo de hasta 135 ° campos de visión a partir de 9 imágenes de 50 ° ancho de campo de visión. se muestran más puntos de fijación distribuidos entre los nueve fijos internos.

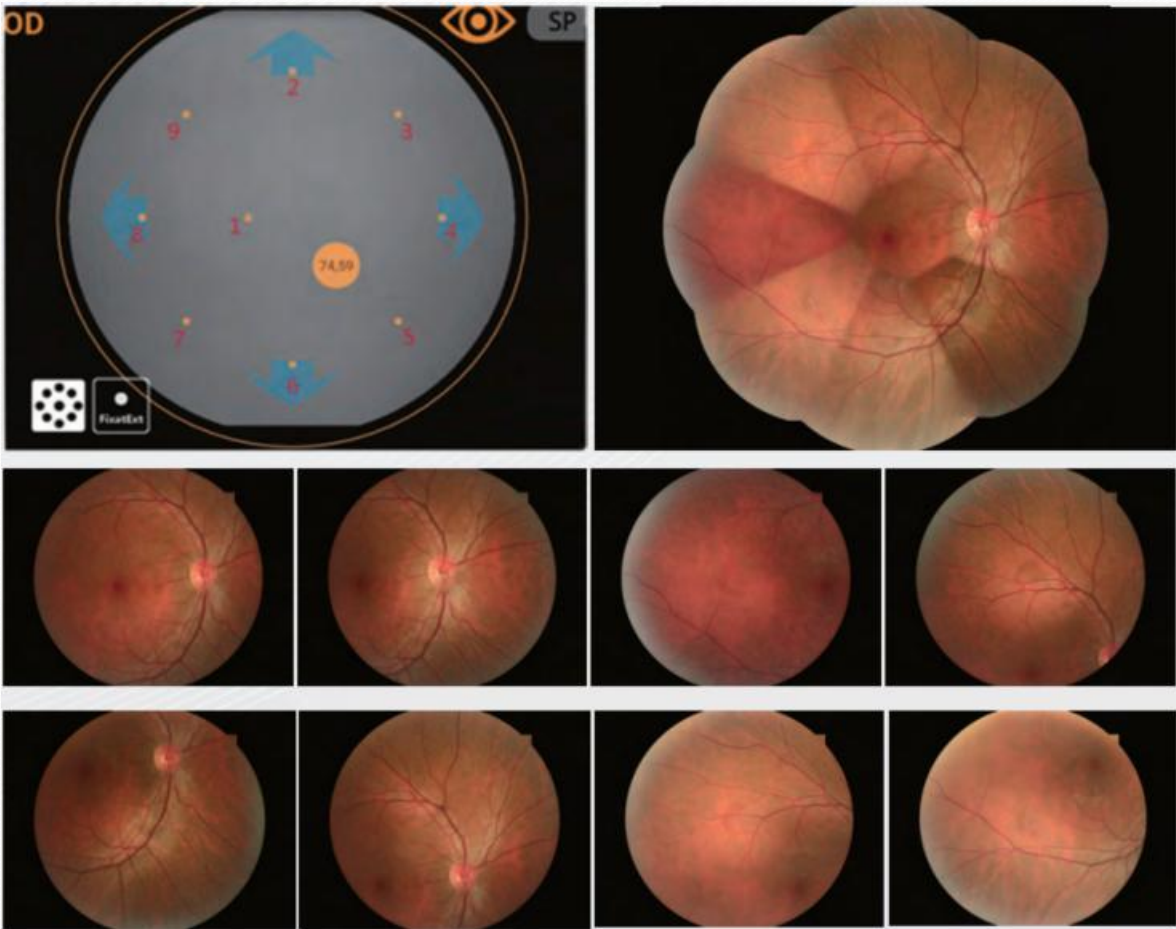


Tecnología óptica avanzada para la iluminación suave

La luz suave reduce la contracción de las pupilas causada por la luz. se pueden obtener imágenes satisfactorias incluso con dos exposiciones consecutivas.

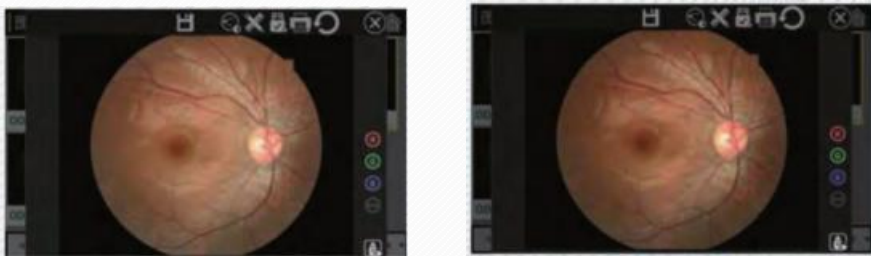


Sistema de software multifuncional

Función de procesamiento de imágenes para obtener fácilmente el área de la lesión y la relación Copa - disco

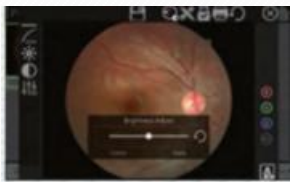


Brillo

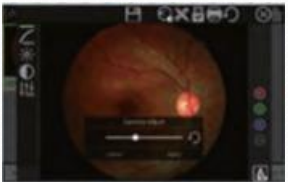

Gamma



Gamma,Contrast,Brillo se puede ajustar según necesidad del médico.

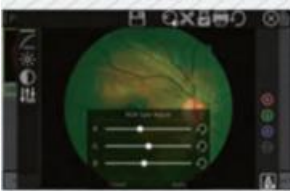

RGB






Contrast


DICOM 3.0/LAN/USB extendido/FTP

- Soporte para DICOM y conexión al sistema PACS hospitalario
- LAN puede compatir cualquier terminal informático, puede mostrar imágenes tomadas por el host en tiempo real
- Almacenamiento extendido USB
- Transmisión remota a través del sistema FTP


Buena calidad de foto

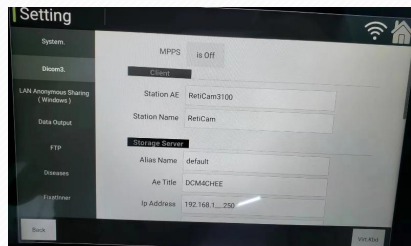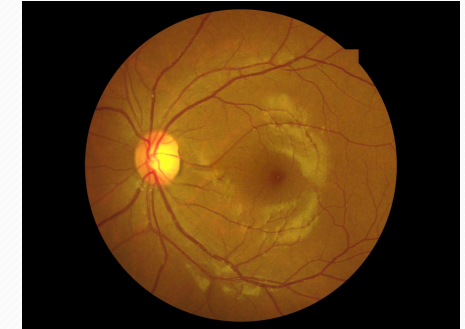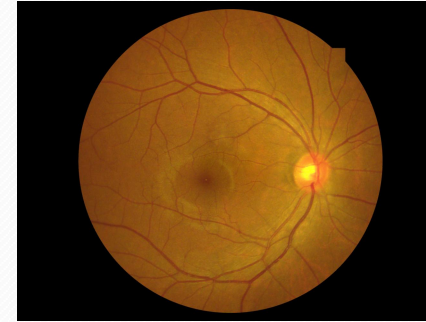

Dicom 3.0

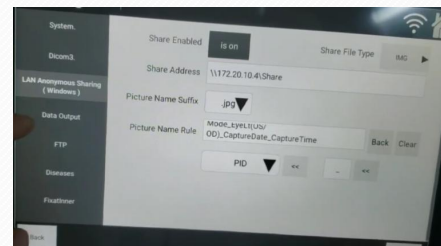

LAN

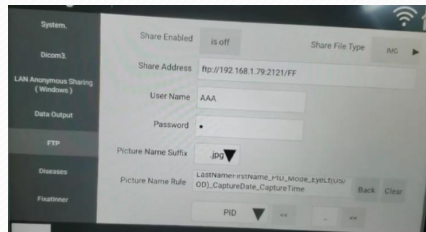

FTP